

■ made
■ in
■ germany



Ultrasonics.Steam.Ultraclean.



Myjki ultradźwiękowe

Elmasonic EASY

The easy way to clean.

- Większa moc dzięki funkcji Pulse w przypadku zanieczyszczeń mineralnych i past polerskich
- Ostrzeżenie o zbyt wysokiej temperaturze w celu ochrony wrażliwych części
- Łatwa obsługa z wyłącznikiem bezpieczeństwa w celu większego bezpieczeństwa użytkownika

Elmasonic EASY

Doskonała technologia czyszczenia

Seria Elmasonic EASY obejmuje 9 rozmiarów urządzeń i charakteryzuje się prostą, przyjazną dla użytkownika obsługą. Dzięki 100% mocy ultradźwięku z częstotliwością 37 kHz, funkcji Pulse i ostrzeganiu, gdy zostanie osiągnięta temperatura graniczna w kąpeli ultradźwiękowej, urządzenia mogą szybko i sprawnie rozwiązywać typowe zadania czyszczenia.

Aby usunąć uporczywe mineralne zabrudzenia i pasty polerskie, należy uruchomić funkcję Pulse.

Działanie ultradźwięków wzrasta nawet o 20%, a zanieczyszczenia można łatwo i szybko usunąć.


Temperaturę graniczną można ustawić indywidualnie. Gdy temperatura graniczna zostanie osiągnięta, wyświetli się komunikat LED. Zapobiega to stwardnieniu zabrudzeń zawierających białko lub uszkodzeniu wrażliwych części.

Porównanie efektów ze Sweep i Pulse

Trwale zintegrowana funkcja Sweep zapewnia równomierny i powierzchniowy rozkład dźwięku, a tym samym równomierne usuwanie zanieczyszczeń. Idealne do tłuszczów, olejów i pigmentów, ponieważ są szybko rozpuszczane w roztworze czyszczącym i oczyszczane.




Po 5 minutach z Sweep

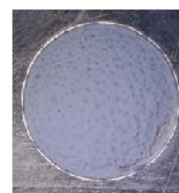


Po 10 minutach z Sweep

Możliwość włączenia funkcji Pulse zwiększa szczytową moc ultradźwięków. "Uderzenia" w zanieczyszczenia są wybiórczo silniejsze niż w trybie standardowym. Ultradźwięki osłabiają zabrudzenia, powodując jego odpadanie. Idealne w przypadku twardych, zaschniętych zanieczyszczeń, jak gips i pasty polerskie. Ponadto widoczny efekt czyszczenia pojawia się do 20% szybciej.

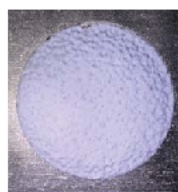



Po 5 minutach z Pulse

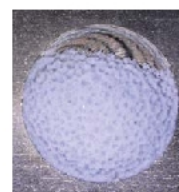

Po 10 minutach z Pulse


Przykłady zastosowania przed i po czyszczeniu

łańcuszek

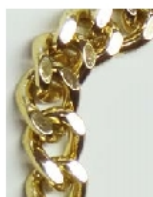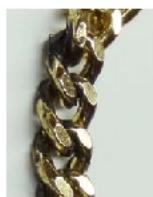


Czyszczenie z past polerskich

kołnierz

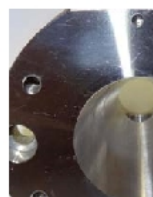

Czyszczenie z tłuszczu i silikonu

łyżki wyciskowe

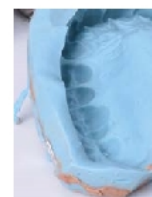

Czyszczenie z masy alginatowej i wyciskowej

Elmasonic EASY w laboratorium dentystycznym do czyszczenia łyżek wyciskowych



Elmasonic EASY w laboratorium chemicznym



Elmasonic EASY

Ultradźwiękowe urządzenia czyszczące o 100% mocy dźwięków w przypadku każdego zadania czyszczenia

Elmasonic EASY jest dostępna w 9 rozmiarach, z obudową ze stali nierdzewnej i ulepszoną ochroną przeciwbryzgową zintegrowanej elektroniki poprzez wyższe nóżki. Od Elmasonic EASY 30 H urządzenia są standardowo wyposażone w grzanie, a od Elmasonic EASY 60 H urządzenia posiadają odpływ.



Elmasonic EASY do czyszczenia biżuterii i części zegarków



Elmasonic EASY do przemysłowego czyszczenia w warsztatach



Elmasonic EASY

Dane techniczne i akcesoria

	EASY 10 / H	EASY 15 / H	EASY 30 H	EASY 40 H	EASY 60 H	EASY 100 H	EASY 120 H	EASY 180 H	EASY 300 H
Maks. pojemność (l)	0,8	1,75	2,75	4,25	5,75	9,50	12,75	18,0	28,0
Pojemność robocza (l)	0,7	1,2	1,9	3,2	4,3	7,5	11,3	12,9	20,6
Efektywna wydajność ultradźwięków (W)	30	35	80	140	150	150	200	200	300
Wydajność grzewcza (W)	60	120	200	200	400	400	800	800	1200
Wym. zewn. myjki S/G/W (mm)	206/116/178	175/180/212	300/179/214	300/179/264	365/186/264	365/278/264	365/278/321	390/340/321	568/340/321
Wym. wew. wanny S/G/W (mm)	190/85/60	151/137/100	240/137/100	240/137/150	300/151/150	300/240/150	300/240/200	327/300/200	505/300/200
Wym. wew. kosza S/G/W (mm)	177/73/30	112/103/50	198/106/50	190/105/75	255/115/75	255/200/75	250/190/115	280/250/115	455/270/194
Waga (kg)	2,0	2,1	3,3	4,0	5,1	5,9	7,5	8,5	11,0

Akcesoria do Elmasonic EASY

Szeroka gama akcesoriów obejmuje węzownice chłodzące, skrzynie do tłumienia hałasu, a także różne koszyki i wsporniki. Pozwala to na stosowanie urządzeń ultradźwiękowych Elmasonic EASY w dziedzinie czyszczenia zegarków i biżuterii, w laboratorium, w laboratorium dentystycznym, a także w czyszczeniu części przemysłowych w warsztatach.



Suszarki Elmadry TD, kosze do czyszczenia w różnych rozmiarach i o różnej wielkości oczek: 7x1mm, 9x1mm lub 6x1,2mm; stojak na pierścieniu, urządzenie zaciskowe np. na opaski, itp.



Wanny hostalenowe i kwasowe, uchwyty do probówek, uchwyty na instrumenty, wsporniki montażowe i kosze zanurzeniowe



Skrzynie tłumiące hałas z wyciągiem, do urządzeń różnej wielkości



Węzownica chłodząca, szklane zlewki, pokrywka z otworami, pokrywki do zlewek, stojak na pierścieniu



Ultrasonics.Steam.Ultraclean.